

器具機械 6 5 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用注入器具 70718000

オムニカートリッジシリンジ


【形状・構造及び原理等】

概要：ポイル・ストレージした歯科用寒天印象材カートリッジタイプをシリンジ本体に装填し、印象面に注入する歯科用注入器具（カートリッジタイプ用）である。

構造：本品は、ニードル、本体、握り部、押し棒からなる。ニードルは3種類（1.9G曲、1.9G直、2.0G曲）あり、通気針（掃除棒）が付属する。

原理：ポイル・ストレージしたカートリッジを、ニードルを取り付けたシリンジ本体脇より装填し、押し棒を押すことにより、寒天を印象面に注入する。

<構造図>

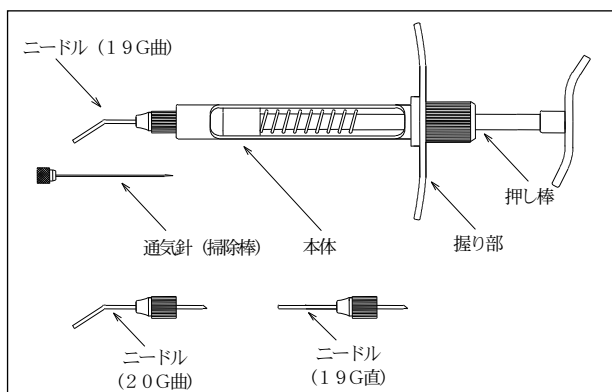

ニードル (1.9G曲、1.9G直、2.0G曲)	ステンレス
本体・握り部・押し棒	真鍮

【使用目的又は効果】


印象面に歯科用寒天印象材を注入するために用いる歯科用注入器具である。

【使用方法等】

- 1) シリンジ本体にニードルを取り付けます。
- 2) 寒天印象材用コンディショナーでポイル・ストレージが完了した歯科用寒天印象材カートリッジタイプを用意します。
- 3) 押し棒を引きながら、歯科用寒天印象材カートリッジタイプ（ゾル化された）を本体脇よりアルミシール側をニードル側にして先に装填します。
- 4) 印象面に注入する前に、術者又は補助者が寒天を手、爪等に少量押し出して、粘性や温度が適当かどうか確認します。
- 5) 形成歯牙等必要部位に注入します。
- 6) 注入終了後、押し棒を引きながらカートリッジを尾部より引き上げるようにして抜去します。（一度使用したカートリッジ内に、残量があり、再度使用する場合は、必ず再度ポイル・ストレージしてから使用して下さい。）

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・寒天を装填する前に本品の清掃、洗浄、滅菌、乾燥を十分に行い、清潔に使用すること。（ニードル部分に寒天が残っていると、注入時にうまく押し出されない場合があるので、留意すること。）
- ・破損の恐れがあるので、特にニードルの装着脱は注意して行うこと。

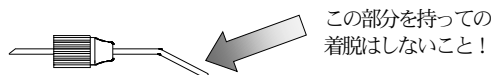

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 患者が誤って飲み込まないようにニードル部分は確実に取り付けること。
- 2) 本品に破損（割れ、ヒビ等）及び変形、腐食等のあるものは使用しないこと。
- 3) 鋭利な部分があるため、針刺等には十分注意すること。

*【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本品に水分が付着したまま長時間放置すると錆染み等の原因となることがあるので、十分な洗浄、滅菌後、水分を除去し、十分に乾燥させてから保管すること。
- ・もらい錆を防ぐために錆びている器具と一緒に収納、保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 点検上の注意

- 1) 使用前、使用後に破損（割れ、ヒビ等）及び変形、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
- 2) 本体、ニードル等に劣化異常を認めた場合は新しいものと交換すること。

* 2. 洗浄・滅菌上の注意

- 1) 金属素材に影響を及ぼすことがあるので、薬液消毒を行う時は薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。
- 2) 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール等の薬剤は金属腐食を起こす恐れがあるので、使用しないこと。
- 3) 本品が変質、変色する恐れがあるので、滅菌の際は留意すること。
- 4) 本品は使用後、直ちに洗浄し、付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社オムニコ

住所：〒294-0013
千葉県館山市宝貝182

製造元：有限会社秋山歯科器具製作所

発売元：株式会社ヨシダ

住所：〒110-8507
東京都台東区上野7-6-9

電話番号：03-3845-2931